

# Patsy - Kompresjonsbukse

ART.NO 51201

Hellang kompresjonsbukse i strikket sømløst materiale. Anbefales etter inngrep på ben og buk ved fettsguging og/eller kirurgi. Hekte- og krok-knepping på begge sider for enkel på- og avkledding/justering av passform. Åpning i skrittet gjør det mulig å gå på toalettet uten å måtte ta av plagget. Linning med silikonkant gjør at buksene sitter godt. Bred kile på innsiden av lårene gir god komfort og funksjon. Formbrodert, fleksibelt materiale med fireveis-stretch som former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å skjære eller kjennes ubehagelig. Formstrikkede soner i kne-, sete- og lyskere regionen samt forsterket strikking over buken.

**Indikasjoner:** Kompressionsplagg etter plastisk kirurgi. Motsvarende kompresjonsklasse 1.

**Kontraindikasjoner:** Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose.

**Materiale:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C, kan ved behov vaskes på høyere temperatur, maks 60°C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemidler, klorin eller tøymykner. Skal ikke tørketromles.

**Måltaking:** For å oppnå optimal passform og korrekt kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes ubehagelig eller stramme.

**Midje:** Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.


**Hofte:** Stå med føttene samlet og mål omkretsen over underlivsbenet, der hofte/setet er på sitt bredeste.

**Lår:** Omkrets midt på låret.

Størrelse	Midjemål cm	Hoffemål cm	Lårmål cm	Art.no Sort	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51201-00-30	51201-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51201-00-40	51201-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51201-00-50	51201-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51201-00-60	51201-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51201-00-70	51201-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51201-00-80	51201-08-80



Hekte- og krok-knepping på begge sider, silikon i linningen.

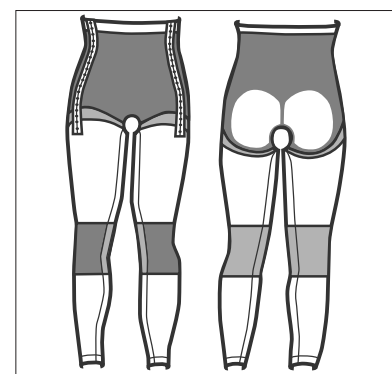

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

