

# Cindy - Kompresjonsbody

ART.NO 51208

Kompresjonsbody med ekstra høy midje i strikket sømløst materiale. Anbefales etter inngrep i mage, sider, rygg, rumpe og lår, f.eks. fettsugning og/eller kirurgi. Bodyen har hekte- og krok-knepping på begge sider for enkel på- og avkledning/justering av passform. Bred kile på innsiden av lårene gir god komfort og funksjon. Bodyen har en skjult åpning i skrittkilen som gjør det mulig å gå på toalettet uten å ta av plagget. Åpningen er designet for å gi god kompresjon i området. Avtakbare og regulerbare skulderbånd. Formstrikket, fleksibelt materiale med fireveis-stretch som former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å skjære eller kjennes ubehagelig. Formstrikkede soner i sete-, rygg- og lyskere regionen samt forsterket strikking over buken.

**Indikasjoner:** Kompressionsplagg etter plastisk kirurgi. Motsvarende kompresjonsklasse 1.

**Kontraindikasjoner:** Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose.

**Materiale:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C, kan ved behov vaskes på høyere temperatur, maks 60°C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemidler, klorin eller tøymykner. Skal ikke tørketromles.

**Måltaking:** For best mulig passform og riktig kompresjonsgrad er det viktig at plagget måles nøye i henhold til måltabellen. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes ubehagelig eller stramme.

**Midje:** Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.


**Hofte:** Stå med føttene samlet og mål omkretsen over pubis, der hofte/setet er på sitt bredeste

**Lår:** Omkrets midt på låret.


Størrelse	Midjemål cm	Hoffemål cm	Lårmål cm	Art.no Beige	Art.no Svart
XS	62-68	86-91	46-50	51208-08-30	51208-00-30
S	69-75	92-97	50-54	51208-08-40	51208-00-40
M	76-83	98-103	54-58	51208-08-50	51208-00-50
L	84-92	104-111	58-62	51208-08-60	51208-00-60
XL	93-101	112-119	62-66	51208-08-70	51208-00-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51208-08-80	51208-00-80



Hekte- og krok-knepping på begge sider og avtakbare skulderbånd.

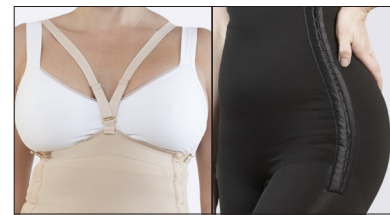

Skulderstroppene kan festes på forsiden eller i sidene.

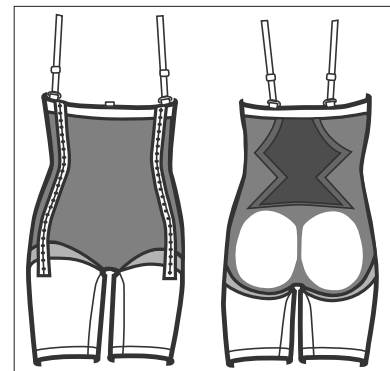

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

