


Compression Garments by NordiCare

Cindy

art no 51208

HIGH WAIST BODY

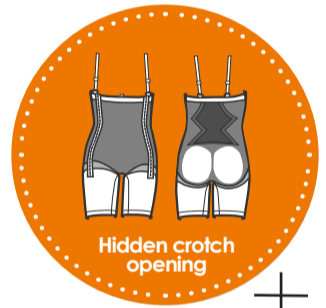

Compression class I (15-21 mmHg)

Available colors:

Compression class I (15-21 mmHg)

Adjustable with hook & eye

Seamless


4-way stretch

This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.

MD Class I

CE

Size	Waist cm	Hip cm	Thigh cm
XS	62-68	86-91	46-50
S	69-75	92-97	50-54
M	76-83	98-103	54-58
L	84-92	104-111	58-62
XL	93-101	112-119	62-66
2XL	102-110	120-127	66-70

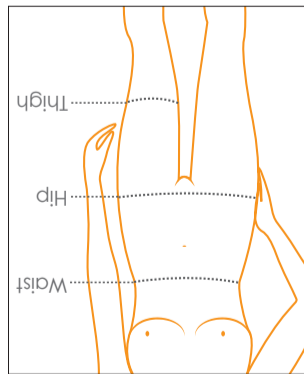

NordiCare[®]

Solrosvägen 1,
SE-263 62 Viken
Sweden

Phone +46 42 35 22 20,
Fax +46 42 35 22 21

info@nordicare.se,
www.nordicare.se

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
6234-2001 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

DE Kompressions-Bodysuit mit hoher Taille aus nachlosem Strickmaterial. Empfohlen nach Operationen an Bauch, Seiten, Rücken, Gesäß und Oberschenkeln wie Fettabsaugung und / oder Operation. Der Body hat einen Haken- und Hakenverschluss auf beiden Seiten und verstellbare, abnehmbare Schultergurte.

ES Faja de contención de cintura alta, fabricada en tejido de punto sin costuras. Recomendado después de intervenciones quirúrgicas en la zona abdominal, en los costados, así como en la espalda, los glúteos y los muslos, como por ejemplo, en casos de liposucción y/o cirugía. La faja tiene una abertura oculta en la zona de la entrepierna, un cierre de con forma de gancho y lengüeta en ambos lados, con tirantes que pueden ajustarse y retirarse.

Bodyn har en skjult öppning i skriftkilen, hette- og krok-knepping på begge sider og avtakbare skulderbånd.

FI Tukibody jossä korkeaa vyötäröä sumatonta neuluttua materiaalia. Suositellaan vaistan, kylkien, selän, pakaroiden ja reisten leikkauksen, kuiten rasvaimun ja/tai leikkauksen jälkeensä. Vartaloissa on piilokilla haarakillassa, hakaskilnityks moiemmillä sivuilla sekä säädettävät, irrotettavat olkaimet.

EN Compression body with high waist in knitted seamless material. Recommended after surgery or liposuction on the abdomen, sides, back, seat and thigh. The body have a hidden opening in the crotch wedge, hook and eye closure in both sides and adjustable shoulder straps.

SE Kompressionsbody med hög midja i stickat sömlöst material. Rekommenderas efter ingrepp på buk, sidor, rygg, stuss och lår såsom fetttsugning och/eller kirurgi. Bodyn har dold öppning i grenkilen, hysk- och hakknäppning i båda sidor och justerbara, avtagbara axelbånd.

DK Kompressionsbody med høj talje i strikret, sømløst materiale. Anbefales efter indgreb på mave, sider, ryg, balder og lår, såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Bodyen har en skjult åbning i skridtblingen. Justerbar hængseldåbning på begge sider og aftagelige skulderstropper.

NO Kompressions-body med høy midje i strikret sømløst materiale. Anbefales etter ingrepp i mage, sider, rygg, rumpe og lår, f.eks. fetttsugning og/eller kirurgi.

Cindy – HIGH WAIST BODY

art no 51208

Application

SE 1. Se till att huden är torr. Öppna hyskor/hakar.
2. Dra försiktigt upp bodyn till höften. Kontrollera att grenpartiet sitter högt/bekvämt i grenen samt att bodyn är centrerad mitt bak.
3. Dra sedan upp bodyn över mage och rygg, se till att dra upp bodyn ordentligt så att den kommer högt upp.
4. Knäpp hyskor/hakar i sidan till önskad storlek/form/kompression. Se till att flärpen bakom hyskor/hakar ligger slät mot huden, innan du spänner axelbanden.

DK 1. Huden skal være tør. Åben hæfter.
2. Træk forsigtigt bodyen op til hoften. Sørg for at skridtdelen sidder højt/behageligt i skridtet, samt at bodyen er centreret bagpå.
3. Træk derefter body'en op over mave og ryg, sørg for at trække bodyen ordentligt op.
4. Luk hæfter i siden til den ønskede størrelse/form/kompression. Sørg for, at klappen bag hæfter ligger glat mod huden, inden du strammer skulderstroppen.

NO 1. Pass på at huden er tørr. Åpne hektene.
2. Dra bodyen forsiktig opp til hoffene. Kontroller at midjepartiet er høyt/behagelig, og at bodyn er sentrert midt på bak.
3. Trekk deretter bodyen over magen og ryggen, og sørg for å trekke ryggen ordentlig opp slik at den kommer høyt opp.
4. Reguler hefter/kroker på siden til ønsket størrelse/form/kompresjon. Kontroller at flikene bak hefter/kroker ligger jevnt mot huden, før du strammer skulderstroppene.

FI 1. Varmista, että iho on kuiva. Avaa lenkit/hakaset.
2. Vedä body varovasti lantiolle asti. Haaraosan tulee asettua tarpeeksi korkealle ja mukavasti, ja body on asetuttava selkäpuolella keskelle.
3. Vedä body vatsan ja selän yli siten, että selkäosa tulee kunnolla ylös asti.
4. Kiinnitä sivulla olevat hakaset siten, että koko/muoto/kompressio on halutunlainen. Tarkista, että hakasten alla oleva kaistale jää liitteästi ihoa vasten, ennen kuin kiristät olkahihnat.

EN 1. Make sure your skin is dry. Open the hook and eye closure.
2. Carefully pull the body up to the hip. Make sure that the crotch part is high/comfortable in the crotch and that the body is centered at the back.
3. Then pull the body over your abdomen and back, make sure to pull the back properly.
4. Close the hook/eyes in the side at the desired size/shape/compression. Make sure the flap behind the hook/eyes is flat against the skin, before you tighten the shoulder straps.

DE 1. Stellen Sie sicher, dass die Haut trocken ist Verschlussbaken öffnen.
2. Ziehen Sie den Body vorsichtig bis zur Hüfte hoch. Überprüfen Sie, ob der Schrittbereich hoch / bequem im Schritt liegt und der Body hinten mittig sitzt.
3. Ziehen Sie dann den Body über den Bauch und den Rücken und achten Sie darauf, den Body ausreichend hochzuziehen da dieser einen hohen Sitz benötigt.
4. Die seitlichen Verschlussbaken in der gewünschten Größe/Form/Kompressionsgrad schließen. Stellen Sie vor dem Festziehen der Schultergurte sicher, dass die Laschen hinter den Verschlussbaken glatt auf der Haut aufliegen.

ES 1. Asegúrese de que la piel está seca. Abra los broches/corchetes.
2. Con cuidado, súbale el braguero hasta la altura de las caderas. Compruebe que la zona de la entrepierna resulta cómoda y que la braguero queda en posición central en la parte de la espalda.
3. Después, súbalo hasta que cubra el abdomen y la espalda. Preste atención para subir correctamente la zona de la espalda de la prenda de forma que quede a la altura correcta antes de cerrar.
4. Abroche los corchetes laterales de tal forma que se ajusten a sus necesidades en cuanto a tamaño/forma/compresión. Preste atención para que la solapa situada detrás de los corchetes quede lisa, ajustar los tirantes.

Indication

SE Rekommenderas efter plastikkirurgi. Kompression förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och bidrar till smärtlindring. Motsvarande kompressionsklass 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos.

DK Anbefales efter plastikkirurgi. Ved kompression forbedres kredsløbet, risikoen for hævelse efter operation mindskes, der opnås bedre opheling og ligeledes smertelindring. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

NO Anbefales etter plastikkirurgi. Kompresjon forbedrer sirkulasjonen og minsker risikoen for hevelse etter operasjon, gir bedre heling og i tillegg smertelindring. Tilsvarende kompresjonsklasse 1.

Kontraindikasjoner: Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose.

FI Suositellaan plastiikkakirurgian jälkeen. Kompressio parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotuksen riskiä leikkauksen jälkeen, mikä parantaa paranemisprosessia ja edistää kivunlievitystä. Vastaava kompressioluokka 1.

Vasta-aiheet: Infektio. Valtimoverenkiertohäiriöt. Suuri tromboosiriski.

EN Recommended after softer plastic surgery. Compression improves circulation and reduces the risk of post-operative swelling, leading to better healing and even pain relief. Corresponding compression class 1.

Contraindications: Infection. Arterial circulatory disorders. High risk of thrombosis.

DE Empfohlen nach plastischer Chirurgie. Die Kompression verbessert die Durchblutung und reduziert das Schwellungsrisiko nach der Operation, was den Heilungsprozess verbessert und zur Schmerzlinderung beiträgt. Entsprechende Kompressionsklasse 1.
Kontraindikationen: Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko.

ES Se recomienda después de la cirugía plástica. La compresión mejora la circulación y disminuye el riesgo de inflamación después de una operación, permite una mejor recuperación e incluso alivia el dolor. Clase de contención correspondiente al nivel 1.
Contraindicaciones: Infecciones, trastornos circulatorios en las arterias, riesgo de trombosis elevado.

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden, ta av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Fjern produktet af og kontakt hjælpemiddelleverandøren, hvis det svier eller gnaver, eller der opstår farveændringer på huden. Afprøvelse og anbefalinger til anvendelse skal foretages af en læge eller under vejledning af en sundhedsfagligt uddannet person. Følg brugervejledningen for at få det bedste resultat. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svir, gnager eller hvis det oppstår fargeforandringer i huden, ta av produktet og kontakt utprøveren. Utprøving og anbefaling om bruk bør utføres av eller under ledelse av medisinsk personell. Følg brukerveiledningen for å få best resultat. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos ihoa kirvelee, tuntuu hankausta tai ihon väri muuttuu, riisu tuote ja ota yhteys sovituksen tehneeseen. Lääketieteellisen koulutuksen saaneen henkilön tulee antaa määräys tai suositus tämän tuotteen käyttämisestä ja sovitusta se. Saat parhaat tulokset noudattamalla käyttöohjeita. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN If you experience a stinging sensation, chafing or color changes in your skin, remove the product and contact your medical professional. Fitting, and recommended use should be handled by or under the supervision of a medical professional. For best results, follow the user instructions. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

DE Bei Schmerzen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung einer medizinisch geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie bitte stets die Gebrauchsanweisung. Ernsthafte Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

ES Si le escuece o roza, o si se producen cambios de color en la piel, quítese el producto y contacte con quien se los vendió. Las pruebas así como recomendaciones de uso se deben hacer por o bajo la supervisión de una persona con formación médica. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de uso. Incidentes graves se informarán a NordiCare y a la autoridad competente.

Measurement

SE För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama. Om patient/användares mått avviker från storlekstabellen bör plagget inte användas. Tänk på att mått kan variera under läkningsprocessen, en tid efter operation då eventuell svullnad gått ner kan en mindre storlek behövas.

DK For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme. Hvis patienten/brugerens mål afviger fra størrelsestabellen, bør beklædningen ikke anvendes. Vær opmærksom på at målene kan variere under helingsprocessen i tiden efter operationen. Når hævelsen falder kan en mindre størrelse være påkrævet.

NO For å oppnå optimal passform og korrekt kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold til måttabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes ubehagelig eller stramme. Dersom pasientens/brukerens mål avviker fra størrelsestabellen, bør plagget ikke brukes. Det kan f.eks. være nødvendig med en mindre størrelse når hevelsen har gått ned etter operasjon.

FI Hyvän istuvuuden ja oikean kompressioasteen saavuttamiseksi on tärkeää, että vaatetta sovitetaan huolellisesti mittataulukkoa käyttäen. Vaatteen on istuttava napakasti, mutta se ei saa tuntua epämukavalta eikä puristaa. Jos potilaan/käyttäjän mitat poikkeavat kokotaulukosta, vaatetta ei pidä käyttää. Ota huomioon, että mitat voivat muuttua paranemisprosessin aikana. Kun toimenpiteestä on kulunut jonkin aikaa ja mahdollinen turvotus on laskenut, voidaan tarvita pienempi koko.

EN For best fit and correct compression it is important that measurements are taken carefully and size chosen according to the measuring table. The fit of the garment should be tight but comfortable. If the patients measurements differ from the measurement table, the garment should not be used. Keep in mind that measurements may vary during the healing process, a time after surgery when any swelling has gone down, a smaller size may be required.

DE Für eine bestmögliche Passform und den richtigen Kompressionsgrad ist es wichtig, dass das Kleidungsstück sorgfältig, gemäß den Angaben der Maßtabelle, angepasst wird. Das Kleidungsstück muss eng anliegen, darf sich aber nicht unangenehm oder einengend anfühlen. Weichen die Maße des Patienten / Anwenders von der Größentabelle ab, sollte das Kleidungsstück nicht verwendet werden. Denken Sie daran, dass die Maße während des Heilungsprozesses variieren können. Einige Zeit nach der Operation, wenn die Schwellung zurückgegangen ist, kann eine kleinere Größe erforderlich sein.

ES A fin de obtener un ajuste perfecto y el grado de compresión correcto es importante que se pruebe la prenda siguiendo las medidas de la tabla. La prenda debe quedar ajustada, sin llegar a resultar incómoda ni apretada. No se debería usar esta prenda si las medidas del paciente/usuario no se corresponden con las medidas indicadas en la tabla. Tenga en cuenta que, tras la intervención, las medidas pueden variar a lo largo del proceso de cicatrización, a medida que la hinchazón desaparece, por lo que, en este caso, será necesaria una talla menor.

Material

87% Polyamide, 13% Elastan. Latex Free.

Washing Instructions

SE Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Ej tortkumlning. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

DK Maskinvaskes ved 40°C, kan ved behov vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60°C. Produktet holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Må ikke tørretumbles. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel da det kan forringe materialet.

NO Maskinvask 40°C, kan ved behov vaskes på høyere temperaturer, maks 60°C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Skal ikke tørketromles. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon.

FI Konepesu 40°C, voidaan tarvittaessa pestä korkeammassa lämpötilassa (enintään 60°C). Tuote kestää pidempään, jos se pestään matalammissa lämpötiloissa. Käytä pesupussia. Ei rumpukuivausta. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa.

EN Machine wash at 40°C. Can be washed at a higher temperature if necessary, max. 60°C. The product will last longer if washed at a lower temperature. Use a laundry bag. Do not tumble dry. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material.

DE Waschanleitung: Maschinenwäsche 40°C, kann bei Bedarf bei höheren Temperaturen gewaschen werden, max. 60°C. Die Lebensdauer des Produkts ist jedoch länger bei einer niedrigeren Waschtemperatur. Die Verwendung eines Waschsäckchens wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht Trockner geeignet.

ES Lavar a máquina a 40°C, en caso necesario se puede lavar a una temperatura superior, máx. 60°C. El producto dura más tiempo si se lava a temperaturas más bajas. Utilice una bolsa de lavado. No utilice blanqueadores, lejía ni suavizantes ya que esto puede empeorar la funcionalidad del material.

