

Cirrus - Airwalker

ART.NO 80215

Cirrus er en individuelt anpassningsbar airwalker som tilbyr maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er helt integrert, noe som gjør at kompresjon og passform kan tilpasses uten separat pumpe. Walkeren har en pumpe på hver siden som kan reguleres uavhengig av hverandre. Ortosen justeres enkelt ved hjelp av tre borrelåsbånd. Både skall og polstring er ventilert og anatomisk utformet. Rullesåle med lav profil gir god stabilitet og gjør det enklere å gå normalt. Lav vekt.

Som tilbehør finnes hækile dersom man ønsker økt plantarfleksjon. Fem frittstående kiler bygges sammen til ønsket høyde.

Indikasjoner: Immobilisering av foten og ankelen. Ved behandling av bløtvevsskader, forstuinger, stabile frakturer og akillesseneruptur. Også til postoperativ stabilisering av fotleddet. **Kontraindikasjoner:** Ikke tiltenkt for diabetespasienter. Ikke tiltenkt for ustabil fraktur.

Risikoer: Ikke kjent.

Materiale: Polypropylen 62%, termoplastisk gummi (TPR) 5%, nylon 11%, PU-skum 8%, TPU 6%, EVA 3%, metall 3%, papirmasse 2%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen håndvaskes og tørkes flatt. Skal ikke tørkes i trommel.

Måltaking: Tilsvarende skostørrelse.


Størrelse XS og S, maksimal vekt 90 kg

Størrelse M, L og XL maksimal vekt 135 kg

Tilbehør:

- Hækil venstre (Universal): 80215-10-00
- Hækil høyre: (Universal): 80215-20-00
- Strømper i 2-pakk (Universal): 80215-30-00
- Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal): 80219-00-00

Størrelse	Skostørrelse	Art.no
X Small	<35	80215-00-30
Small	36-38	80215-00-40
Medium	39-42	80215-00-50
Large	43-45	80215-00-60
X Large	>46	80215-00-70

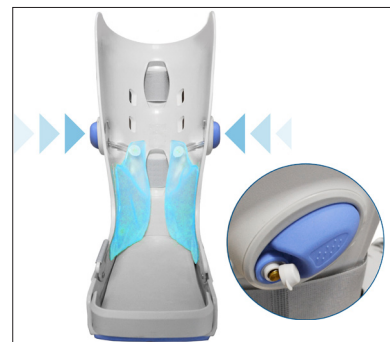

Integrerte pumper på begge sider regulerer kompresjon uavhengig av hverandre.



Avtakbar og justerbar tåbeskyttelse.



Lav rullesåle for naturlig gange.



De sirkulære båndene kan tres gjennom skallet for å gi maksimal kompresjon.



MD Class I CE